

SHIATSU MASSAGE DE DOS




Manuel d'instruction



MASSAGE DE DOS SHIATSU

ADAPTATEUR

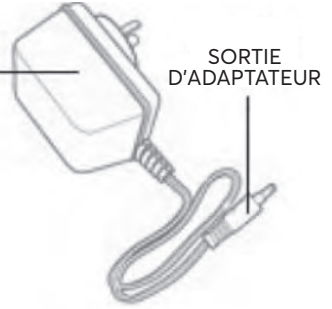

SORTIE D'ADAPTATEUR



ADAPTATEUR POUR PRISE D'AUTO

- PRO Shiatsu massage de dos
- Adaptateur 12V DC
- Adaptateur pour prise d'auto 12V
- Manuel d'opérateur et information sur garantie
- Protecteur de tissus additionnel avec bouts d'acupuncture

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

PRODUIT	PRO SHIATSU MASSAGE DE DOS	DIMENSIONS (MM)	W400XH400XD80
COULEUR	NOIR / GRIS	POIDS	1.7 KG
TISSUS	PU, POLYESTER	SORTIE ÉLECTRIQUE	DC 12V, 24W

SORTIE CÂBLE 1.8M CÂBLE, 12V DC ADAPTATEUR
& ACCESSOIRES ADAPTAEUR D'AUTO

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Les 4 têtes de massage shiatsu aide à relaxer et détendent les muscles endoloris.
2. Chaleur thérapeutique pour améliorer la circulation sanguine.
3. Choix de deux rotations.
4. Conception ergonomique pour le haut et le bas du dos, les mollets et les cuisses.
5. Muni d'un dispositif sécuritaire contre le surchauffement.
6. Rabat additionnel avec bouts d'acupuncture pour relaxer les muscles.
7. Minuterie automatique de 15 minutes.
8. Sangle ajustable pour sécuriser l'appareil à votre chaise.
9. Pour utilisation à la maison ou dans l'auto.



NOUVELLES TÊTES DE MASSAGE

Deux nouvelles paires de têtes rotatives qui réduisent la pression avec les mouvements d'un massage Shiatsu.



VIBRATION

Choix de vibration selon la préférence de l'utilisateur.



CHALEUR THÉRAPEUTIQUE APAISANTE

Optez pour la chaleur afin d'améliorer vos muscles endoloris.



MINUTERIE

Arrêt automatique après 15 minutes de massage continu.



CLÉ DE FONCTION

Facile à opérer.



VERSATILE ET PORTATIF À LA MAISON, AU BUREAU ET DANS L'AUTO

Transformez votre sofa et votre chaise en fauteuil de massage. Muni d'une sangle qui permet de le fixer à vos sièges.

PRÉCAUTIONS SÉCURITAIRES – LIRE AVANT D'OPÉRER

1. Ce produit ne doit pas être utilisé pour fin médical ni comme substitut pour soin médical. Ce produit est conçu pour massage de dos uniquement.
2. Ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans supervision.
3. Veuillez consulter avec votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous :
 - Êtes enceinte
 - Avez un stimulateur cardiaque ou tout autre implant cardiaque
 - Souffrez de diabète
 - Avez des préoccupations concernant votre santé
4. Ne pas utiliser si vous avez des problèmes de peau ou une blessure ouverte.
5. Ne pas utiliser sur des membres corporels enflammés ou enflés.
6. Ne pas utiliser au lit ou lorsque vous sommeillez.
7. Cesser l'utilisation si vous ressentez des malaises ou des douleurs.
8. Ne jamais laisser le produit sans supervision surtout si des enfants sont présents.
9. Ne pas utiliser dans des voitures si la température ambiante est plus de 40°C.
10. Ne pas utiliser près des flammes.
11. Ne jamais recouvrir l'appareil lors de l'usage.
12. L'unité s'arrêtera automatiquement après 15 minutes. Toujours S.V.P. le laisser refroidir pendant 15 minutes avant de le réutiliser.
13. L'unité est muni d'un dispositif sécuritaire contre le surchauffement. Si l'appareil ne redémarre pas après 15 minutes, laisser-le reposer 15 à 30 minutes de plus.
14. Ne pas utiliser plus de 15 minutes à la fois. L'utilisation excessive pourrait entraîner une usure prématurée et réduire la durée de vie de l'appareil.
15. Débrancher lorsque l'unité n'est pas en fonction.
16. Pour réduire les risques d'électrocution, ne pas utiliser sur la peau humide.
17. Garder l'appareil loin de l'humidité. Ne pas utiliser si le produit ou ses composantes sont humides.
18. Utiliser à l'intérieur seulement.
19. Ne pas démonter l'appareil ni tenter de remplacer des composantes.
20. Utiliser seulement les accessoires conçus pour cet appareil. Respectez le voltage inscrit sur l'appareil.




ATTENTION !
Lire attentivement les instructions décrites ci-haut.



OPÉRATION

1. Placer l'unité contre un dossier sécuritaire.
2. Utiliser la sangle pour fixer l'unité en place.
3. Brancher l'unité.
4. Faire fonctionner l'unité par l'interrupteur.

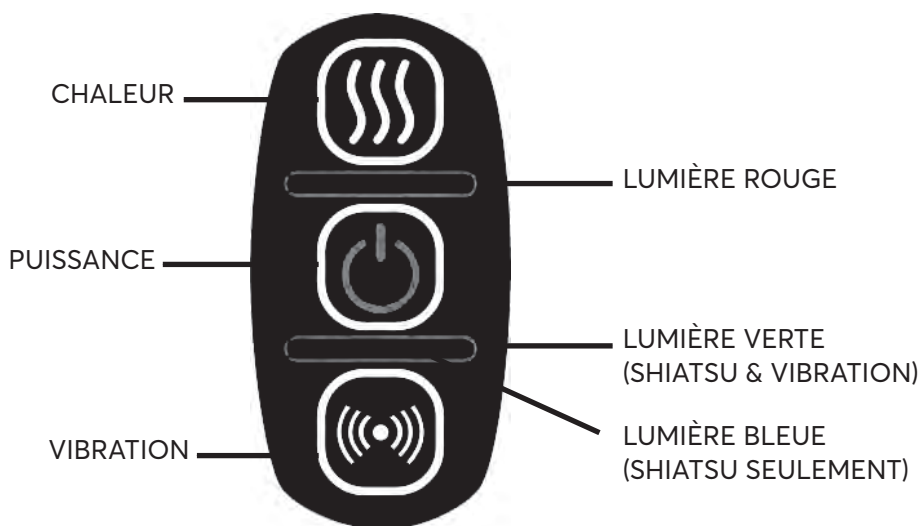

Deux sens de rotations (sens de l'aiguille et contre sens) seront renversées automatiquement en intervalle de 1 minute.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Laver à la main seulement. Ne pas submerger l'adaptateur dans l'eau.
2. Toujours fermer le courant et débrancher avant de nettoyer.
3. Nettoyer avec un linge humide et bien sécher. Ne pas utiliser de l'alcool ou autre produits chimique tel que javellisant.
4. Ne pas étirer l'élastique des sangles.
5. Garder loin de tous appareils chauffants.
Garder loin du feu et ne pas exposer aux rayons de soleil.
6. Ne pas appliquer beaucoup de pression sur les têtes. Un excès de 50 kg de pression peut endommager les têtes et annulera votre garantie. Ne pas utiliser pendant de longues périodes.
7. Entreposer dans un endroit sec et frais. S'assurer que les enfants ne peuvent atteindre le produit. Éviter le contact avec des objets pointus et tranchants qui pourraient endommager le tissu.

DÉPANNAGE

PROBLÈME

Tête tourne très lentement

L'appareil s'éteint soudainement

Ne démarre pas

Les têtes fonctionnent sporadiquement

La lumière est allumée mais les têtes ne fonctionnent pas

SOLUTIONS

Trop de poids sur les têtes.
Réduire le poids et la pression appliqué.

L'appareil était en marche pendant 15 minutes. Le cycle de la minuterie est terminé. Laisser reposer pendant 15 à 30 minutes.

Vérifier que l'appareil n'a pas fonctionné plus de 15 minutes. Si oui, laisser reposer pendant 15 minutes avant de redémarrer. L'appareil nécessite plus de temps pour refroidir si la température de la pièce est élevée.

Vérifier si l'adaptateur est bien branché à l'appareil.

Vérifier si l'adaptateur est bien branché à la prise de courant.

Trop de poids est appliqué.
Réduire le poids.

Appareil peut être coincé.
Enlever tout poids, appuyer sur l'interrupteur pour changer la rotation et réessayer.

NOTE : Si les problèmes persistent, veuillez communiquer avec notre département de service. NE FAIRE AUCUNE TENTATIVE DE RÉPARATION SUR LE PRODUIT.