


# Manuel d'utilisation et d'entretien

---

Appareil de massage Shiatsu pour la nuque et le dos avec compression à l'air

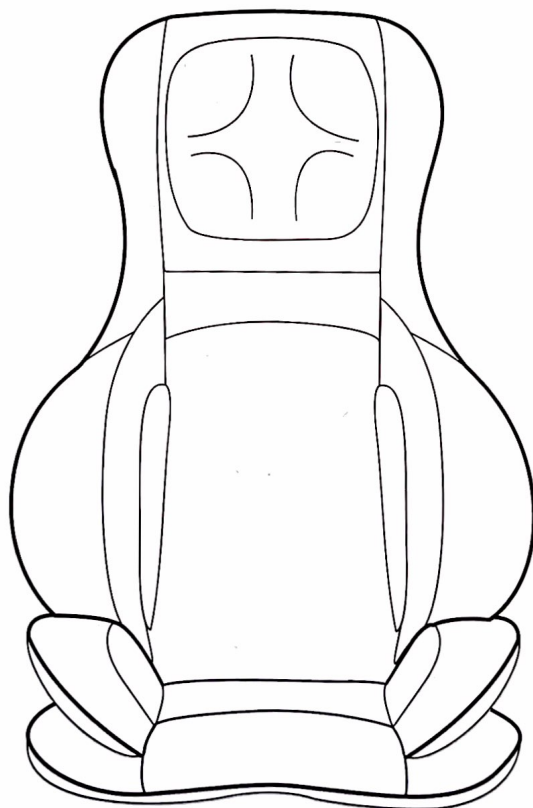

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Consignes de sécurité importantes

L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER EN PRÉSENCE D'ENFANTS, N'EST PAS FAVORABLE. LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES SUIVANTES LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

### **DANGER** - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION :

- Débranchez l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
- avant de le nettoyer.
- NE TENTEZ PAS de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres attaches métalliques avec cet appareil.
- NE PAS placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- NE PAS le placer ou le faire tomber dans l'eau ou dans un autre liquide.
- NE PAS utiliser l'appareil pendant le bain ou sous la douche.
- Examinez soigneusement le revêtement avant chaque utilisation. Jetez l'appareil si le revêtement
- montre des signes de détérioration, tels que des fissures, des cloques ou des craquelures.
- Garder au sec. Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions humides ou mouillées.

### **AVERTISSEMENT** - REDUIRE LES RISQUES DE BRULURE, D'INCENDIE, DE CHOC

ELECTRIQUE OU DE BLESSURE POUR LES PERSONNES.

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou de retirer des pièces ou des accessoires.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par ce manuel, en particulier des accessoires non fournis avec l'appareil.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne laissez JAMAIS tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture.
- NE PAS utiliser l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- NE PAS utiliser ce masseur à proximité de vêtements amples ou de bijoux.
- Tenir les cheveux longs à l'écart du masseur pendant son utilisation.
- NE PAS porter cet appareil par le cordon d'alimentation ou utiliser le cordon comme poignée.

- Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes en position "arrêt", puis retirez la fiche de la prise de courant.
- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil lorsque les ouvertures d'aération sont bloquées. Gardez les ouvertures d'air de peluches, de cheveux, etc.
- Utilisez les surfaces chauffées avec précaution. Peut provoquer de graves brûlures. Ne pas utiliser l'appareil sur des zones cutanées insensibles ou en présence d'une mauvaise circulation. L'utilisation involontaire de la chaleur par des enfants ou des personnes incapables peut être dangereuse.
- Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire quel que soit le réglage de la commande.
- Ne pas utiliser sur un nourrisson ou un invalide ou sur une personne endormie ou inconsciente.
- Ne pas utiliser sur une peau sensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- Vérifiez fréquemment la peau en contact avec la zone chauffée de l'appareil afin de réduire le risque de formation de cloques.
- Ne pas écraser. Éviter les plis brusques.

## **ATTENTION** - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il est uniquement destiné à fournir un massage luxueux
- Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si :
  - Vous êtes enceinte
  - Vous portez un stimulateur cardiaque
  - Vous avez des inquiétudes concernant votre santé
- L'utilisation de ce produit est déconseillée aux diabétiques.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Ne couvrez jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- N'utilisez pas ce produit pendant plus de 15 minutes à la fois.
- Une utilisation prolongée peut entraîner un échauffement excessif de l'appareil et réduire sa durée de vie. Dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil et laissez-le refroidir avant de le remettre en marche.
- N'utilisez jamais ce produit directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
- N'utilisez PAS ce produit en remplacement d'une assistance médicale.
- N'utilisez PAS ce produit avant le coucher. Le massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
- N'utilisez JAMAIS ce produit lorsque vous êtes au lit.
- Ce produit ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une affection physique qui limiterait la capacité de l'utilisateur à actionner les commandes ou qui présenterait des déficiences sensorielles dans la moitié inférieure du corps.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil dans une automobile.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil est conçu pour un usage personnel et non professionnel.

# INSTRUCTIONS

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



## CARACTÉRISTIQUES

- Massage Shiatsu de la nuque à hauteur réglable électriquement
- Massage shiatsu du dos en 2D / 3D par pression des doigts
- Massage par roulement avec réglage de la largeur
- Personnalisation du massage localisé
- Avec fonction de chaleur en option pour le massage du dos
- Les zones de massage peuvent être sélectionnées (haut, bas, tout le dos)
- Massage par vibration du siège (3 niveaux d'intensité en option)
- Massage à l'air sur le dos et l'assise (3 niveaux d'intensité en option)
- Optique Cuir PU et maille respirante

## SOMMAIRE

---

- Masseur Shiatsu pour le cou et le dos
- Adaptateur domestique 12V
- Housse amovible, lavable et détachable

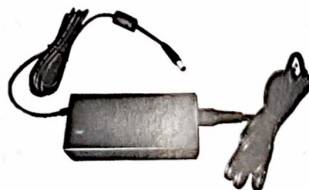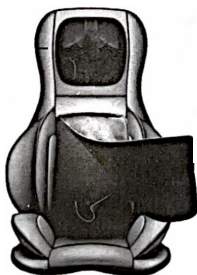


## DONNÉES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| <b>Dimensions:</b>                                     | 31.9 x 22.4 pouces (dossier) 20.9 x 15 pouces (siège) |
| <b>Poids:</b>  | 16.8 lbs  |
| <b>Voltage:</b>  | Entrée : AC 100-240V ~50/60Hz   Sortie : 12VDC 4.0A   |
| <b>Puissance nominale:</b>                             | Max. 48Watt   |
| <b>Durée de fonctionnement automatique par défaut:</b> | 15 minutes  |

# CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT

1. Attachez le masseur à une chaise à l'aide de sangles élastiques.
2. Connectez le câble de l'adaptateur au câble correspondant sur le coussin.

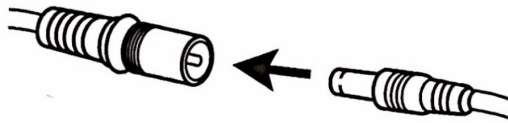

Coté du coussin

Côté de l'adaptateur

1. Branchez l'adaptateur domestique sur une prise électrique.
2. Allumez l'appareil à l'aide du contrôleur (instructions à la page 7).
3. Lorsque vous avez terminé, placez le contrôleur dans la pochette située sur le côté du coussin
4. Le clapet amovible de réglage de l'intensité pour le dos vous permet de choisir un massage plus doux ou plus intense.
5. Le volet détachable pour la nuque vous permet de choisir un massage plus doux ou plus intense.


NOTE:

## Si le massage est trop fort

- (1) Installez le rabat sur le coussin pour obtenir un massage plus doux.
- (2) Si le massage est encore trop fort, modifiez l'installation du rabat sur le coussin. Placez une couverture ou une serviette entre vous et le masseur pour obtenir un massage beaucoup plus doux.

## Si le shiatsu ne peut pas atteindre la région du cou, des épaules ou du bas du dos

- (3) Si vous souhaitez masser votre cou, vos épaules ou le bas de votre dos, mais que les nœuds de shiatsu ne peuvent pas atteindre la zone concernée. Vous pouvez ajuster la hauteur de votre dos lorsque vous êtes assis, en plaçant un coussin d'assise ou un oreiller sur la partie inférieure du dos.

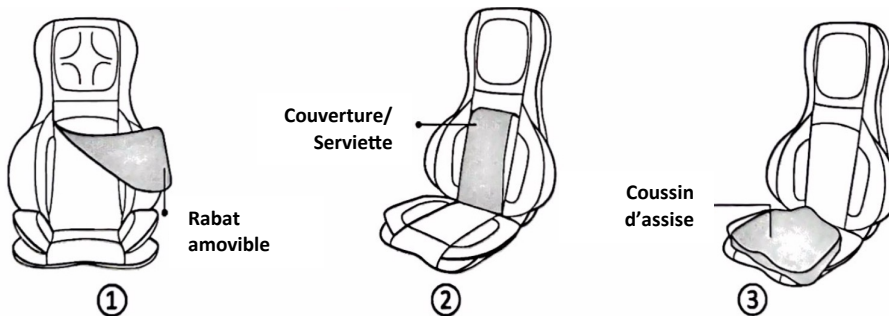

- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes.
- Retirer l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas installer ou utiliser le masseur dans une salle de bain ou dans un endroit humide.

## Attention !

Vous devez accorder à votre corps des périodes de repos. Pour éviter de trop solliciter vos muscles, nous recommandons de ne pas dépasser un massage continu de 15 minutes par séance et de ne pas dépasser 3 séances par jour.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



**Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant de mettre votre appareil en marche. L'utilisation de ce mode d'emploi garantit un fonctionnement sans problème et une efficacité optimale. Conservez ce mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure !**

- L'appareil de massage est conforme aux principes techniques reconnus et aux normes de sécurité les plus récentes.
- Ne pas mouiller, ne pas utiliser d'épingles, ne jamais retirer le couvercle.
- L'appareil N'EST PAS UN JOUET. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez jamais d'autres sources d'alimentation que l'adaptateur domestique fourni d'origine avec cet appareil.
- Toutes les réparations possibles ne peuvent être effectuées que par le personnel autorisé de Solution Idéale. L'utilisation incorrecte et les réparations non autorisées sont interdites pour des raisons de sécurité et entraînent la perte de la garantie.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Évitez tout contact de l'appareil avec l'eau, les températures élevées et la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de câbles, de fiches ou de prises de courant endommagés.
- N'utilisez jamais l'appareil sous des couvertures où l'ouverture de l'air pourrait être bloquée.
- Si les fiches ou les cordons sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, un représentant du service après-vente ou par du personnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas d'affections cutanées, de plaies ouvertes ou de zones gonflées ou enflammées.
- Une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte exclut toute responsabilité en cas de dommages.
- Ne pas utiliser cet appareil en conduisant.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant le sommeil.
- Afin d'éviter une stimulation excessive des muscles et des nerfs, la durée de massage recommandée ne doit pas dépasser 15 minutes.
- Pour une utilisation en toute sécurité, le masseur est équipé d'une protection contre la surchauffe.
- Tout massage - même un massage des mains - doit être évité pendant la grossesse ou en présence d'un ou de plusieurs des troubles suivants: blessures récentes, maladies thrombotiques, toutes sortes de problèmes de santé, toutes sortes d'inflammations et d'enflures, ou cancer.
- Il est recommandé de consulter un médecin avant de se faire masser pour le traitement d'affections et de maladies.
- Si vous êtes dépendant d'appareils électriques, par exemple d'un stimulateur cardiaque, n'oubliez pas de consulter votre médecin avant de vous faire masser.
- Le matériel d'emballage fourni ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- N'utilisez pas ce produit pour un traitement médical.

Le non-respect des instructions ci-dessus peut constituer une mauvaise utilisation du produit et peut entraîner des blessures graves ou des brûlures.

# INSTRUCTIONS RELATIVES AU CONTRÔLEUR

## Bouton de vibration

Appuyez sur cette touche pour activer la vibration du siège, vous pouvez choisir entre forte, moyen, faible ou désactivé.

## Bouton 2D/3D

Appuyez sur ce bouton pour changer de style de shiatsu 2D/3D.

## Bouton Spot

Appuyez pour maintenir la fonction shiatsu dans une seule zone. Appuyez sur les touches fléchées pour ajuster la position des boules de massage shiatsu vers le haut ou vers le bas.

## Bouton d'intensité

Appuyez sur ce bouton pour régler l'intensité du massage à l'air entre le niveau faible, moyen ou élevé.

## Bouton de pression

Appuyez sur ce bouton pour activer le massage à l'air sur le dos.

## Bouton de zone Shiatsu

Sélectionner la zone complète, supérieure ou inférieure du dos pour désigner la zone couverte par le massage shiatsu.



## Bouton de démonstration

Mode automatique. Démonstration rapide des différentes fonctions. Une fois terminée, l'appareil s'éteint automatiquement.

## Bouton Shiatsu pour le cou

Appuyez sur ce bouton pour activer le massage Shiatsu de la nuque. Appuyez à nouveau pour changer le sens de rotation. Appuyez sur les touches fléchées pour ajuster la position des boules de massage shiatsu vers le haut ou vers le bas.

## Bouton de roulement

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de roulement. Les boules de massage se déplacent de haut en bas sur les muscles. Continuer d'appuyer sur le bouton pour régler la largeur des boules de massage.

## Bouton de siège de pression

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le massage à air sur le siège.

## Bouton de chauffage arrière

Appuyez pour activer ou désactiver le chauffage. La chaleur ne peut pas être activée si la fonction shiatsu du dos n'est pas activée.

## Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le masseur

## ENTRETIEN

1. Ne pas laver à la machine ni immerger le produit ou l'adaptateur dans l'eau.
2. Eteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer et retirez l'adaptateur de la prise avec des mains propres et sèches.
3. Le masseur doit être essuyé avec un chiffon légèrement humide et séché soigneusement. N'essuyez pas le produit avec de l'alcool ou des produits chimiques agressifs. Ne pas essuyer le produit avec de l'alcool ou des produits chimiques agressifs tels que du diluant ou de l'eau de Javel.
4. La housse pour le cou est détachable et lavable.
5. Ne pas trop étirer l'élastique du dos.
6. Tenir à l'écart de la chaleur, du feu ou de l'exposition directe au soleil.
7. Ne pas appliquer de pression ou d'impact excessif sur le masseur/les têtes de massage. L'application d'une force directe supérieure à 110 lbs. peut endommager votre masseur et invalider votre garantie. Évitez d'utiliser l'appareil de manière excessive.
8. Rangez le masseur dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.
9. Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus qui pourraient couper ou percer le couvercle du masseur.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

| Faill  | Solutions  |
|--|--|
| Les têtes de massage tournent à vitesse réduite.                                 | La pression exercée sur les têtes de massage est excessive. Réduisez la pression et réessayez.   |
| Les têtes de massage ne tournent que dans la zone supérieure ou inférieure.      | Le massage a été activé pour le haut ou le bas du dos. Appuyez sur la touche "Full Back" pour que le massage couvre les deux régions.  |
| L'appareil s'éteint soudainement.  | L'appareil peut avoir été utilisé pendant 15 minutes. La fonction d'arrêt automatique est activée. Continuez à utiliser l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation après avoir laissé l'appareil au repos pendant 15 minutes.         |
|  | Fonction de protection contre la surchauffe activée. L'appareil est éteint pour votre sécurité. Veuillez laisser l'appareil au repos pendant 15 à 30 minutes avant de le redémarrer.   |
| L'appareil ne démarre pas.   | Vérifier si l'appareil a été utilisé pendant plus de 15 minutes. Si c'est le cas, laissez l'appareil se reposer pendant 15 minutes avant de continuer. L'appareil peut nécessiter plus de temps pour refroidir dans des environnements chauds. |
|  | Vérifier si l'adaptateur est branché dans la prise.  |
|  | Vérifier que la sortie de l'adaptateur est connectée au fil d'entrée de l'appareil.  |
| Mouvement saccadé des têtes de massage / Vibrations de l'appareil                | Une pression excessive peut avoir été exercée sur l'appareil. Réduisez la pression et essayez à nouveau.   |
| Les lumières infrarouges sont allumées mais aucun mouvement des têtes de massage | L'appareil est peut-être bloqué. Retirez la pression de l'appareil et appuyez sur le bouton "Full Back" pour réessayer.  |



## GARANTIE

Votre appareil est garanti contre tout défaut de matériaux d'origine et de main-d'œuvre pendant la période inscrite sur votre facture à compter de la date d'achat, en usage domestique normal, conformément au guide d'utilisation. Vous devez fournir votre preuve d'achat. Une franchise de 25\$ sera exigée pour la réparation ou le remplacement de votre appareil. Le remplacement de toute pièce sur votre appareil ne prolonge en aucun cas la durée de la garantie.

La preuve d'achat originale doit être fournie au service clientèle pour la garantie.

### **RÉPARATION SOUS GARANTIE**

1. Veuillez nous téléphoner au numéro sur votre facture afin de vérifier si une réparation à distance est possible.
2. Si nécessaire, faire parvenir l'appareil de massage à l'adresse indiquée sur votre facture avec les informations suivantes inscrites sur une feuille à l'intérieur de la boîte:

A- Votre nom

B- Votre adresse (sera utilisée pour vous retourner l'appareil)

C- Votre numéro de téléphone

D- Une copie de votre facture

Solution Idéale décline toute responsabilité pour les coûts, dommages ou réparations engendrés par les situations découlant :

- Des dommages causés en cas de non-respect des consignes d'entretien recommandées; de toute utilisation ou manipulation négligente, d'une mauvaise utilisation, d'un manque
- D'entretien ou de toute utilisation non conforme au guide d'utilisation;
- De toute utilisation de l'appareil à des fins autres qu'un usage domestique normal, c'est-à-dire à des fins commerciales ou de location;
- De toute utilisation de pièces non recommandées par le guide d'utilisation;
- D'une utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux fournis ou recommandés par Solution Idéale;
- De facteurs externes tels que les intempéries, des défaillances électriques ou des surtensions;
- De réparations ou modifications effectuées par des parties ou représentants non autorisés;
- De l'usure et de la détérioration normale;
- D'un dommage causé par une utilisation non conforme;

